

INSTRUKCJA OTWIERANIA ZDJĘĆ Z PŁYT

Włóż płytę do napędu CD, a następnie otwórz zdjęcia za pomocą autoodtworzacza lub eksploratora plików.

I SPOSÓB: ZA POMOCĄ AUTOODTWARZACZA

1 Kliknij na „Uruchom UruchomMnie.exe”.




2 Wybierz „Dla Pacjenta”.




3

Kliknij dwukrotnie na badania lub odhacz i zaznacz „oko”.

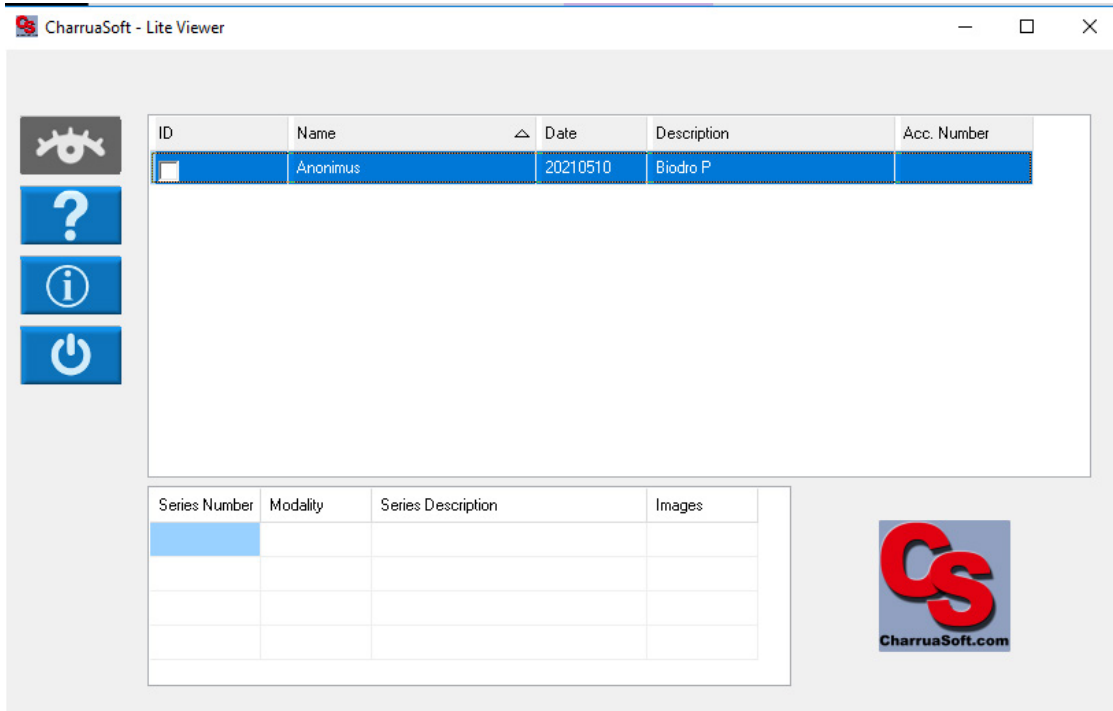

4


Otworzy się okno ze zdjęciem.

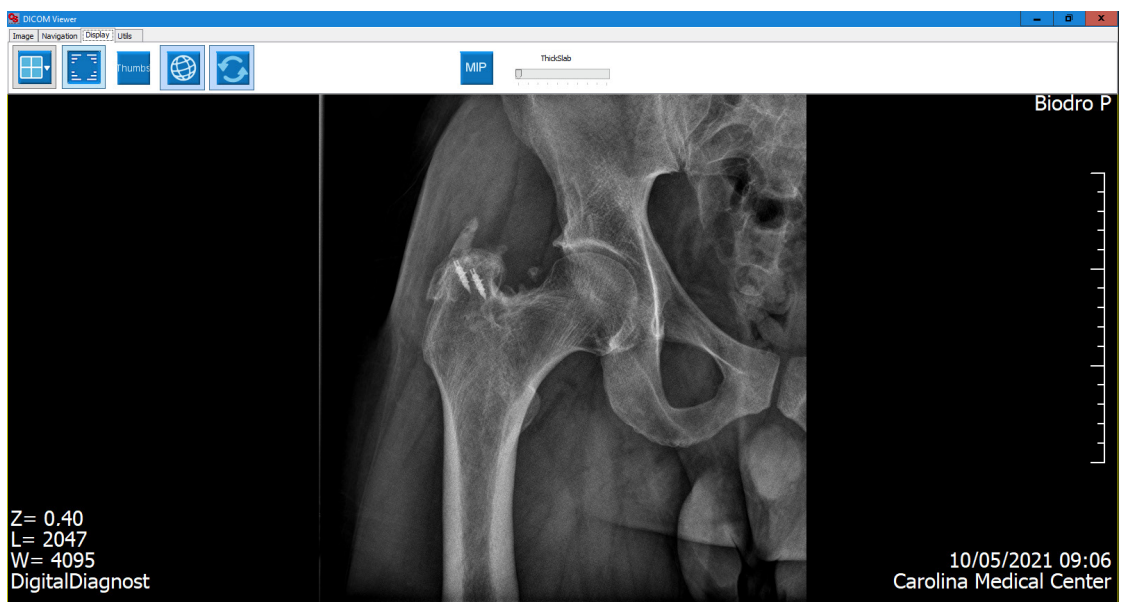

II SPOSÓB: ZA POMOCĄ EXPLORATORA PLIKÓW

1

Otwórz Explorator plików i wejdź w „Ten Komputer”. Następnie prawym przyciskiem myszki kliknij w Stację dysków DVD i wybierz „Otwórz”.

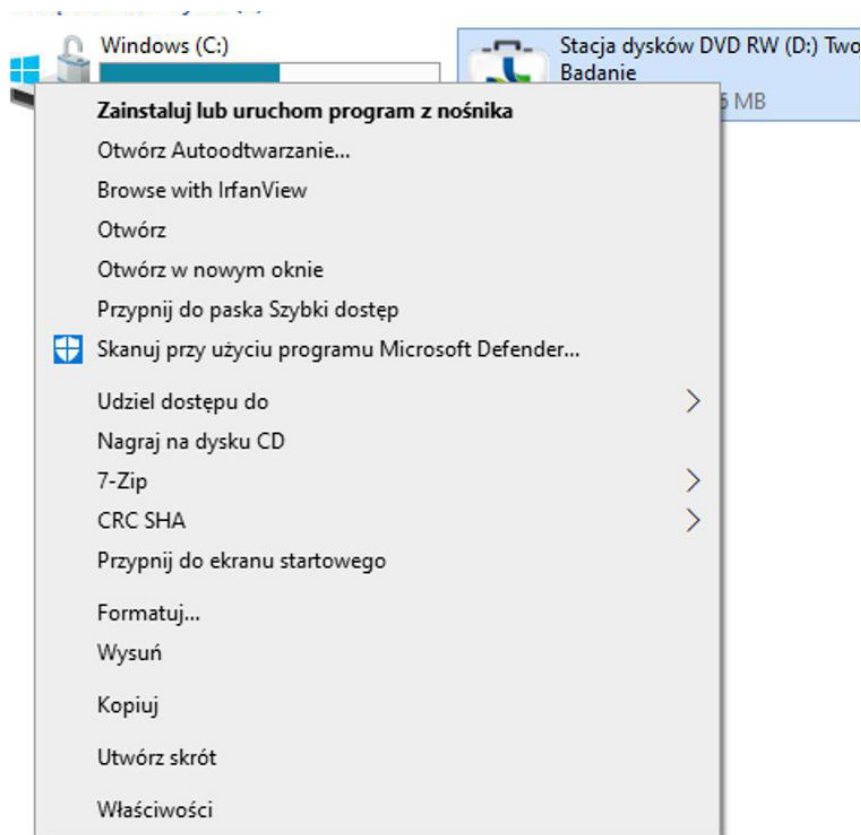

2

Uruchom plik „liteviewer”.

Pliki znajdujące się obecnie na dysku (22)

CDViewer	10.05.2021 09:15	Folder plików	
Czytaj_mnie_pliki	10.05.2021 09:15	Folder plików	
DATA	10.05.2021 09:15	Folder plików	
Licencje	10.05.2021 09:15	Folder plików	
Materialy	10.05.2021 09:15	Folder plików	
viewer-mac.app	10.05.2021 09:15	Folder plików	
weasis	10.05.2021 09:15	Folder plików	
Autorun	30.01.2017 12:26	Informacje Instala...	1 KB
Czytaj_mnie	10.04.2017 10:30	Chrome HTML Do...	17 KB
DICOMDIR	10.05.2021 09:15	Plik	2 KB
info	07.12.2020 13:22	Dokument tekstowy	1 KB
liteviewer	10.08.2013 12:53	Aplikacja	5 164 KB
O_plycie	10.04.2017 10:28	Chrome HTML Do...	6 KB
UruchomMnie	10.04.2017 10:14	Aplikacja	315 KB


3

Kontynuuj tak jak od punktu 3 - sposób za pomocą autoodtwarzacza.

OBSŁUGA ODTWARZACZA ZDJĘĆ

Uruchom zdjęcie. Nasuwając kursor ku górze ekranu, pokaże się panel (jak niżej).


Są tu opcje regulowania kontrastu (zakładka „Image”), obrotu zdjęcia oraz inne parametry, które głównie używane są przez radiologów i lekarzy.

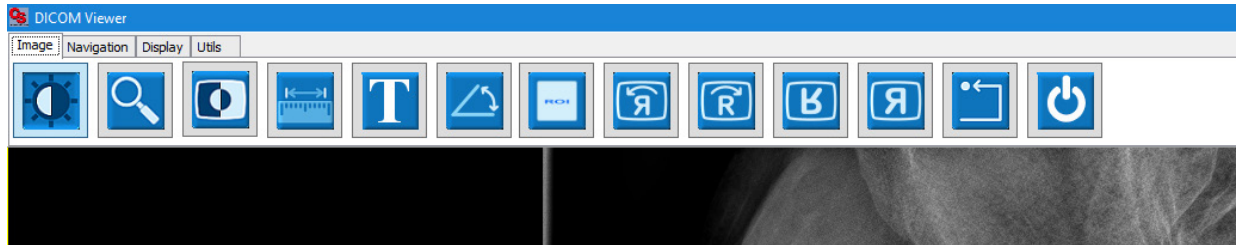

W zakładce „Navigation” mamy możliwość przechodzenia między zdjęciami. Ta sama opcja występuje po nakierowaniu kursora na zdjęcie i użyciu scrolla w myszce.



W zakładce „Display” mamy opcje zmiany widoku. Najprzydatniejsze są pierwsze dwie ikony znajdujące się z lewej strony. Pierwsza z nich dzieli obraz w taki sposób, aby zobaczyć kilka zdjęć w jednym momencie. Dzięki drugiej ikonke można schować napisy znajdujące się wokół zdjęcia.

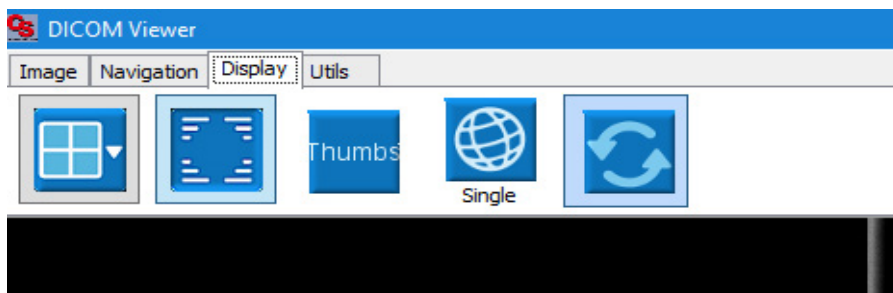

W zakładce „Utils” znajdują się trzy ikony. Pierwsza służy do kopiowania zdjęcia i przeklejenia go później do innego programu. Druga ikona z napisem „DICOM” wyświetla okno z informacjami o zdjęciu. Po kliknięciu trzeciej ikony mamy możliwość zapisać dane zdjęcie na komputerze w formacie JPEG.

